

PREXOLID®

2026

# СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ

Оперативность, Надёжность, Успех

eclectic

# PREXOLID®

Каталог продукции

TYPE X

TYPE S



## 1

### ВВЕДЕНИЕ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| О компании .....            | 2 |
| Сертификаты и патенты ..... | 3 |

## 2

### ИМПЛАНТАТЫ PREXOLID

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Обработка поверхности .....         | 4 |
| Особенности продукта / Type S ..... | 6 |
| Особенности продукта / Type X ..... | 9 |

## 3

### ПРОТЕЗИРОВАНИЕ PREXOLID

#### Цементная фиксация .....

12

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Cover Screw, Healing Abutment ..... | 13 |
|-------------------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Cast (CCM) Abutment ..... | 14 |
|---------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Impression Post, Analog ..... | 15 |
|-------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Transfer Abutment ..... | 16 |
|-------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Angle Abutment ..... | 18 |
|----------------------|----|

#### Цифровые решения .....

21

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Pre-milled Abutment, Ti-base Abutment ..... | 22 |
|---------------------------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Scan Body, Digital Analog ..... | 23 |
|---------------------------------|----|

#### Система Multi-Unit .....

24

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Multi-unit Abutment ..... | 25 |
|---------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Multi-unit Accessories ..... | 26 |
|------------------------------|----|

#### Хирургические инструменты

|                        |    |
|------------------------|----|
| Pro Surgical Kit ..... | 27 |
|------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Compact Surgical Kit ..... | 28 |
|----------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Drills, Drivers, Instruments ..... | 29 |
|------------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Drilling Sequence ..... | 30 |
|-------------------------|----|



eclectic

# ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ИМПЛАНТОЛОГИИ

Добро пожаловать в будущее имплантологии с ECLECTIC.

---

## ПРОДУКЦИЯ, ПРЕВОСХОДЯЩАЯ ВАШИ ОЖИДАНИЯ

Стремясь к совершенству и внедряя передовые технологии, мы предлагаем решения, задающие новые стандарты качества и надежности.

[www.prexolid.com](http://www.prexolid.com)  
[contact@prexolid.com](mailto:contact@prexolid.com)

33, Buncheon-gil 45beon-gil, Bongdam-eup, Hyohaeng-gu,  
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18329,  
Republic of KOREA




## СЕРТИФИКАТЫ И ПАТЕНТЫ

Гарантия высочайших стандартов и передовых научных разработок в каждом изделии.



Синтез сертифицированного качества и передовых технологий



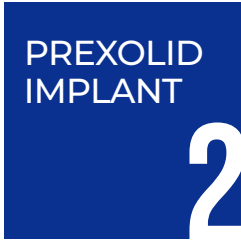

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ PREXOLID

ОПТИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ

Шероховатость поверхности


Технология обработки поверхности PREXOLID® Ostera™, выполненная по методу SLA (пескоструйная обработка крупнозернистыми частицами с последующим кислотным травлением), обеспечивает оптимальную шероховатость (Sa 1,7–1,8 мкм). Данный диапазон максимизирует контакт кости с имплантатом (BIC), гарантируя высокую стабильность и надежную остеоинтеграцию.

Оптимальная текстура поверхности не только повышает надежность фиксации, но и снижает риск развития периимплантита за счет минимизации бактериальной адгезии. Кроме того, она облегчает эффективную очистку при профилактическом обслуживании, обеспечивая долговременное здоровье тканей и высокий клинический успех.

Шероховатость поверхности

(ед. изм.: мкм)

|              | Ra        | Sa        |
|--------------|-----------|-----------|
| PREXOLID     | 1.5 - 1.6 | 1.7 - 1.8 |
| Компания «О» | 2.5 - 3.0 | 2.5       |

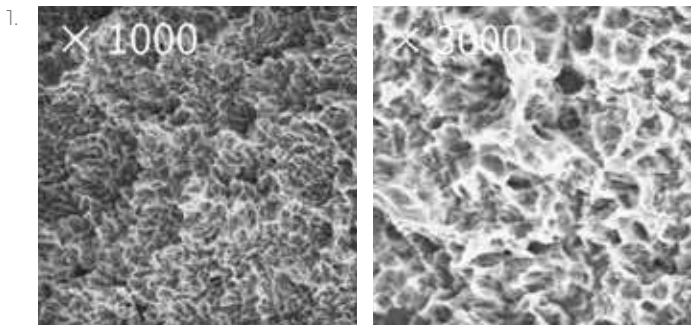


Слева (x1000), Справа (x3000)

1. Dae-Sung Kim, Won-Tak Cho, Soon Chul Heo, Jung-Bo Huh\* (2024)  
*Comparison of osseointegration in commercial SLA-treated dental implants with different surface roughness: a pilot study in beagle dogs, 353*  
<https://doi.org/10.4047/jap.2024.16.6.348>


Гистологический анализ (BIC & ITBD)

(ед. изм.: %)

|              | BIC         | ITBD        |
|--------------|-------------|-------------|
| PREXOLID     | 66.48±10.06 | 72.26±8.99  |
| Компания «О» | 62.83±11.82 | 66.54±12.03 |

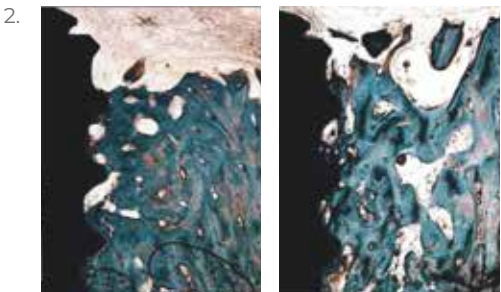

Компания «О»

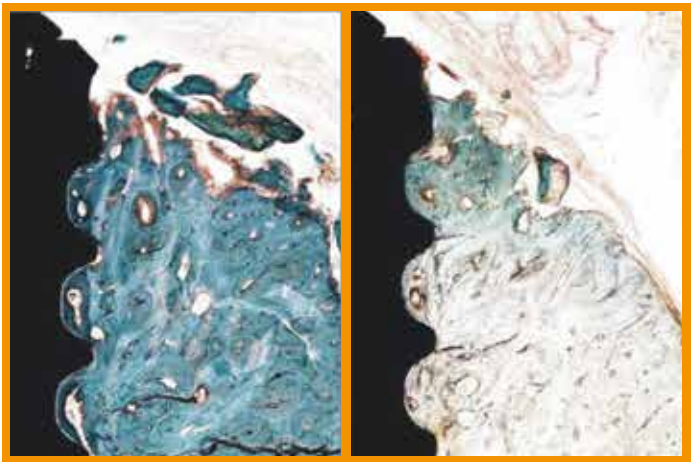


ИМПЛАНТАТ PREXOLID

2. Gang-Ho Bae, Won-Tak Cho, Jong-Ho Lee, Jung-Bo Huh\* (2024)  
*Efficacy of plasma treatment for surface cleansing and osseointegration of sandblasted and acid-etched titanium implants, J Adv Prosthodont. 2024;16(3):189-199 (p. 194).*  
<https://doi.org/10.4047/jap.2024.16.3.189>

# Остеоинтеграция


Технология обработки поверхности PREXOLID® Ostera™, выполненная по методу SLA (пескоструйная обработка крупнозернистыми частицами с последующим кислотным травлением), обеспечивает оптимальную остеинтеграцию, гарантируя долгосрочный клинический успех имплантации.

Данная усовершенствованная поверхность способствует более быстрому и прочному остеогенезу, повышая стабильность и долговечность имплантата. Кроме того, она упрощает проведение процедур направленной костной регенерации (GBR), делая клинический процесс более эффективным и предсказуемым.

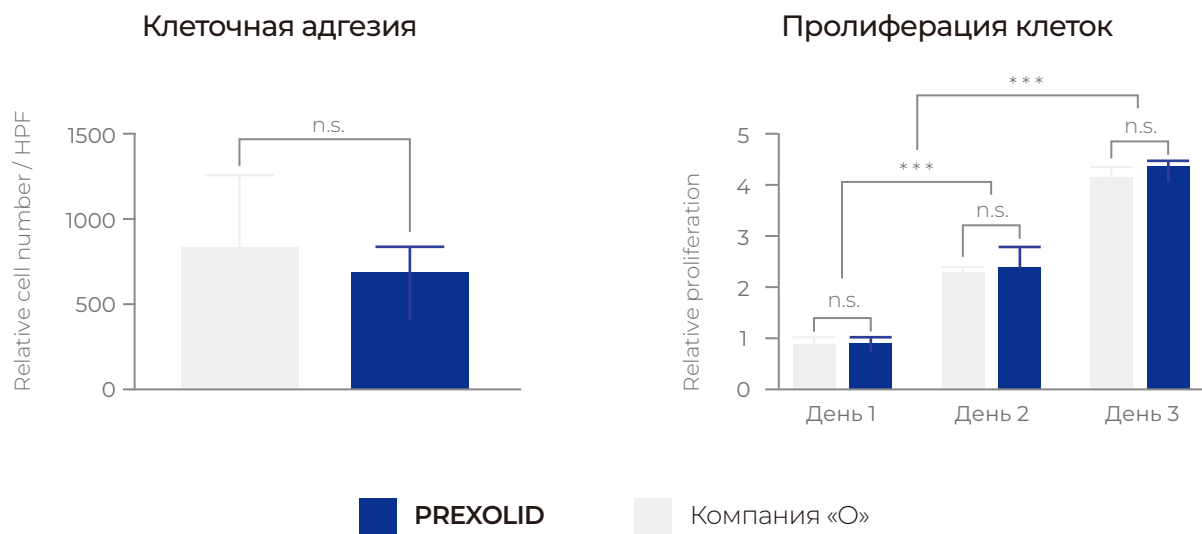

## ■ Флуоресцентная микроскопия

Сокращение сроков заживления, высокая прогнозируемость остеинтеграции и удобство в клиническом обслуживании делают технологию поверхности PREXOLID® Ostera™ оптимальным выбором для практикующих специалистов.

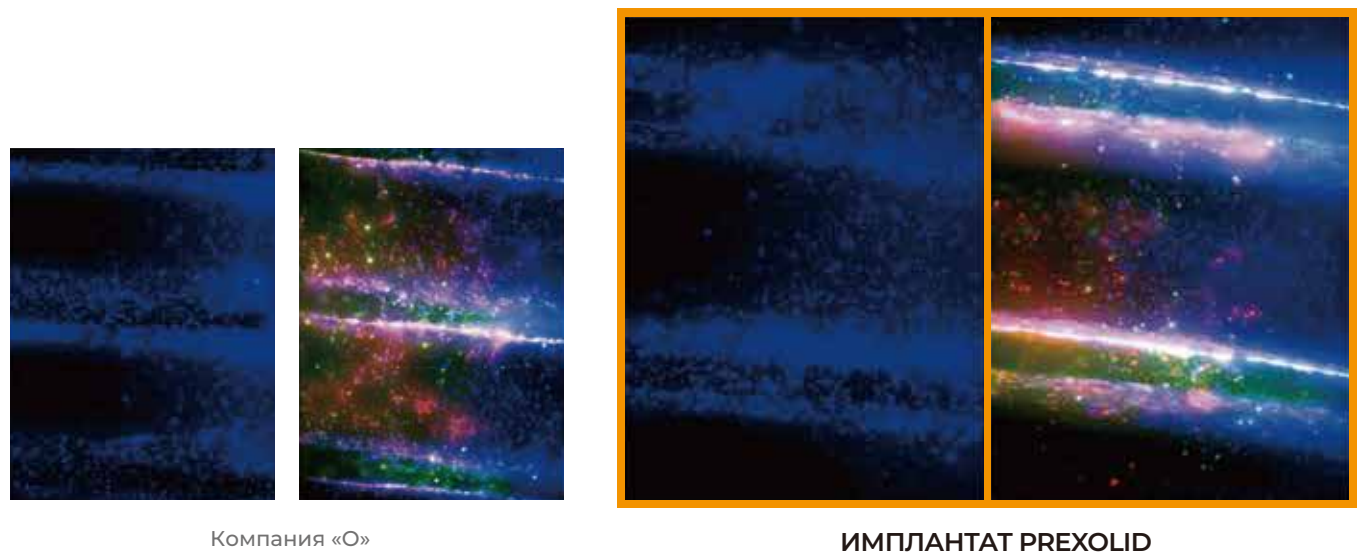

Dae-Sung Kim, Won-Tak Cho, Soon Chul Heo, Jung-Bo Huh\* (2024)  
*Comparison of osseointegration in commercial SLA-treated dental implants with different surface roughness: a pilot study in beagle dogs. J Adv Prosthodont. 2024;16(6):348-358 (p. 353).*  
<https://doi.org/10.4047/jap.2024.16.6.348>


Характеристики  
продукта

2

# PREXOLID® TYPES

Интеллектуальное решение для достижения оптимальной  
первичной стабильности и протоколов немедленной нагрузки

Материал: чистый титан Grade 4 (cpTi)

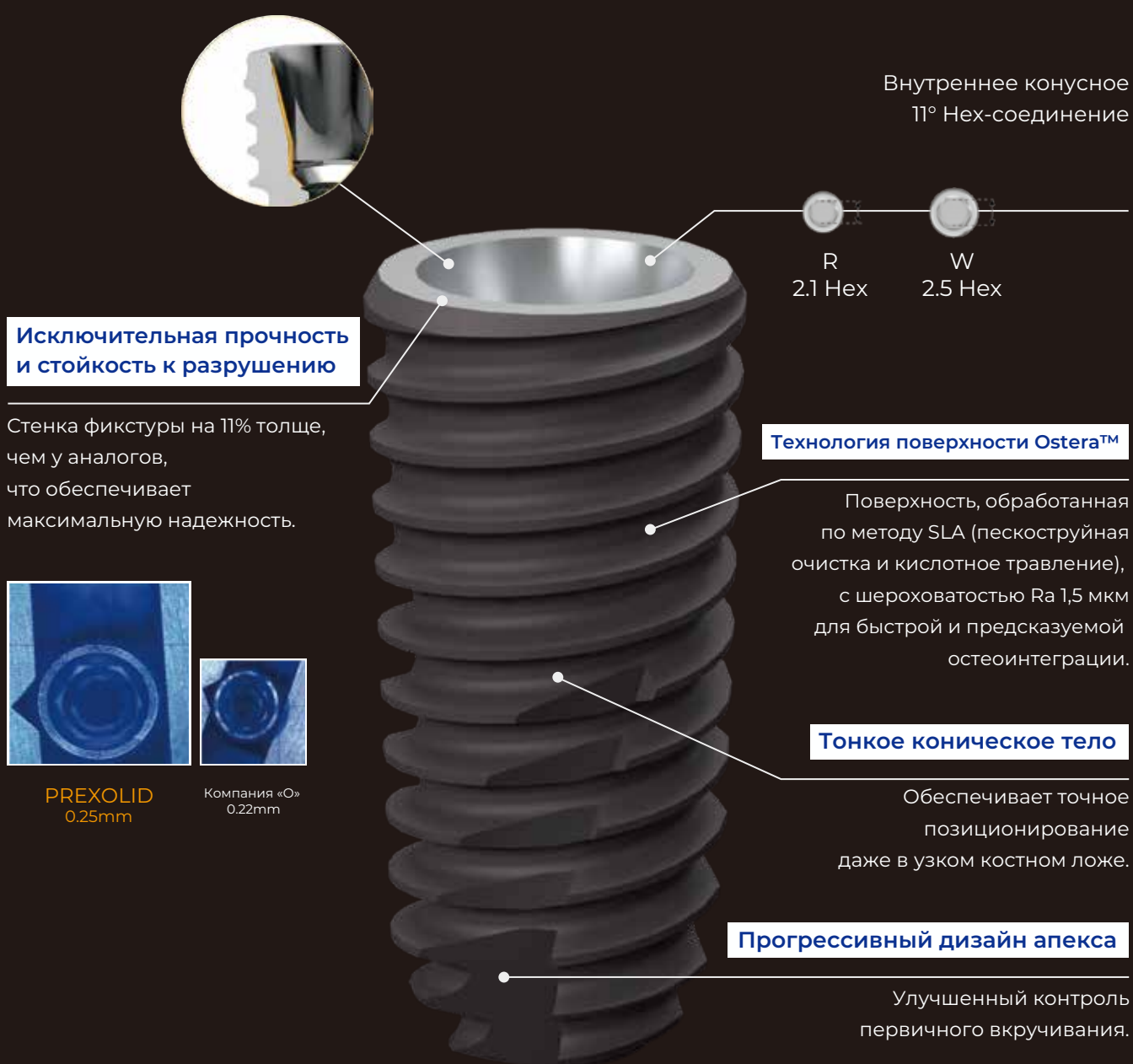


## Дизайн и спецификация

Система имплантатов PREXOLID® TYPE S оснащена надежным шестигранным соединением (Hex), обеспечивающим стабильность и точность в дентальной имплантологии.

Данное соединение обеспечивает простое самонаправленное введение, давая клиницистам четкую тактильную обратную связь в процессе установки.

### PREXOLID® TYPE S

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Материал</b>    | Чистый титан Grade 4 (cpTi)                                       |
| <b>Поверхность</b> | Поверхность Osera™ (обработка методом SLA)                        |
| <b>Фикстура</b>    | F 3.0 – F 7.0                                                     |
| <b>Длина</b>       | 6.0 mm – 13.0 mm                                                  |
| <b>Соединение</b>  | Regular: 2.1 Hex (F 3.0 – F 3.5)<br>Wide: 2.5 Hex (F 4.0 – F 7.0) |

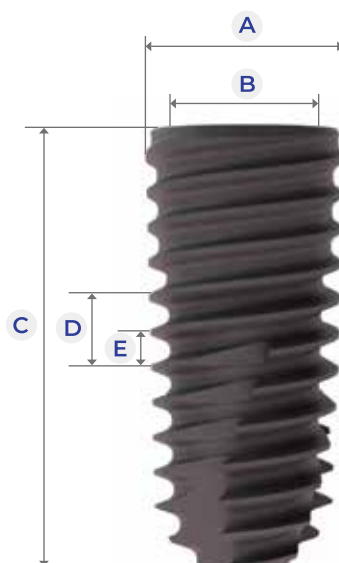

(ед. изм.: мм)

|                             | F 3.0                    | F 3.5             | F 4.0                          | F 4.5 | F 5.0                                | F 5.5 | F 6.0 | F 7.0 |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>A</b> Внешний диаметр    | 3.2                      | 3.75              | 4.25                           | 4.6   | 5.05                                 | 5.6   | 6.2   | 7.1   |
| <b>B</b> Диаметр соединения | 2.6                      | 2.8               | 3.4                            | 3.4   | 3.4                                  | 3.4   | 3.4   | 3.4   |
| <b>C</b> Длина имплантата   | 8.5 / 10.0 / 11.5 / 13.0 |                   | 7.0 / 8.5 / 10.0 / 11.5 / 13.0 |       | 6.0 / 7.0 / 8.5 / 10.0 / 11.5 / 13.0 |       |       |       |
| <b>D</b> Шаг резьбы         | 1.6                      | 1.6               | 1.6                            | 1.6   | 1.8                                  | 1.8   | 2.0   | 2.0   |
| <b>E</b> Интервал резьбы    | 0.8                      | 0.8               | 0.8                            | 0.8   | 0.9                                  | 0.9   | 1.0   | 1.0   |
| Применение                  | Фронтальный отдел        | Фронтальный отдел | Премоляр / Моляр               | Моляр | Моляр                                | Моляр | Моляр | Моляр |

Винт-заглушка в комплекте

|                                 |      | R<br>(2.1 Hex)                                                                    |                                                                                   | W<br>(2.5 Hex)                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Фикстура<br>Фактический диаметр |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |      | F 3.0<br>3.2 mm                                                                   | F 3.5<br>3.75 mm                                                                  | F 4.0<br>4.25 mm                                                                  | F 4.5<br>4.6 mm                                                                   | F 5.0<br>5.05 mm                                                                  | F 5.5<br>5.6 mm                                                                     | F 6.0<br>6.25 mm                                                                    | F 7.0<br>7.1 mm                                                                     |
| L (мм)                          | 7.0S |                                                                                   |                                                                                   | FSW<br>4006S                                                                      | FSW<br>4506S                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 7.0  |                                                                                   |                                                                                   | FSW<br>4007                                                                       | FSW<br>4507                                                                       | FSW<br>5007                                                                       | FSW<br>5507                                                                         | FSW<br>6007                                                                         | FSW<br>7007                                                                         |
|                                 | 8.5  | FSR<br>3008                                                                       | FSR<br>3508                                                                       | FSW<br>4008                                                                       | FSW<br>4508                                                                       | FSW<br>5008                                                                       | FSW<br>5508                                                                         | FSW<br>6008                                                                         | FSW<br>7008                                                                         |
|                                 | 10.0 | FSR<br>3010                                                                       | FSR<br>3510                                                                       | FSW<br>4010                                                                       | FSW<br>4510                                                                       | FSW<br>5010                                                                       | FSW<br>5510                                                                         | FSW<br>6010                                                                         | FSW<br>7010                                                                         |
|                                 | 11.5 | FSR<br>3011                                                                       | FSR<br>3511                                                                       | FSW<br>4011                                                                       | FSW<br>4511                                                                       | FSW<br>5011                                                                       | FSW<br>5511                                                                         | FSW<br>6011                                                                         | FSW<br>7011                                                                         |
|                                 | 13.0 | FSR<br>3013                                                                       | FSR<br>3513                                                                       | FSW<br>4013                                                                       | FSW<br>4513                                                                       | FSW<br>5013                                                                       | FSW<br>5513                                                                         | FSW<br>6013                                                                         | FSW<br>7013                                                                         |


Характеристики  
продукта

2

# PREXOLID® TYPE X

Усовершенствованный дизайн для превосходной первичной стабильности и немедленной нагрузки, задающий новый стандарт в имплантологии

Материал: чистый титан Grade 4 (cpTi)

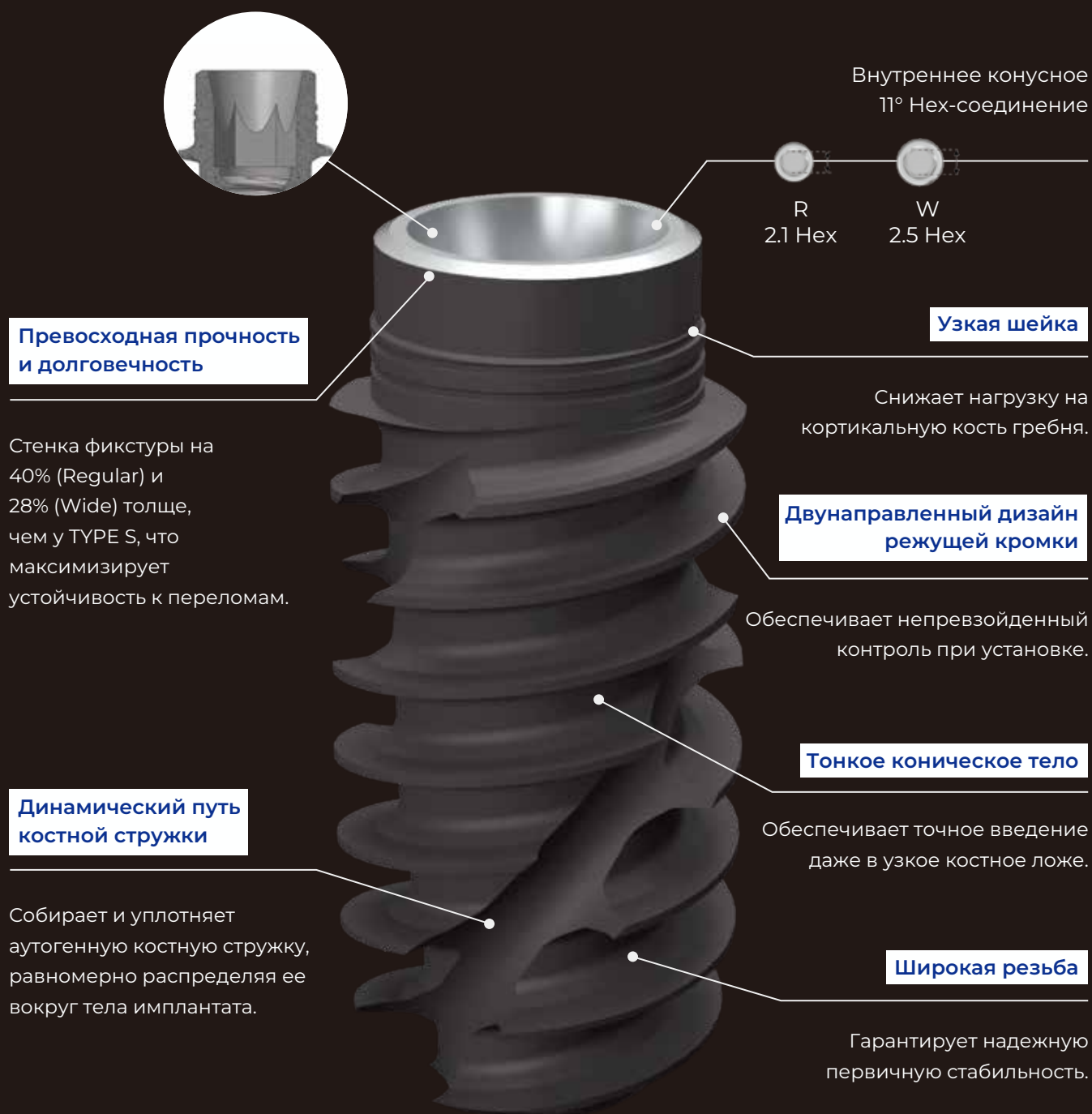


## Дизайн и спецификация

Система имплантатов PREXOLID® TYPE X оснащена надежным шестигранным соединением (Hex), обеспечивающим стабильность и точность в дентальной имплантологии.

Данное соединение обеспечивает простое самонаправляемое введение, давая клиницистам четкую тактильную обратную связь в процессе установки.

### PREXOLID® TYPE X

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Материал</b>    | Чистый титан Grade 4 (cpTi)                               |
| <b>Поверхность</b> | Поверхность Ostera™ (обработка методом SLA)               |
| <b>Фикстура</b>    | F 3.5 – F 5.0                                             |
| <b>Длина</b>       | 7.0 mm – 13.0 mm                                          |
| <b>Соединение</b>  | Regular: 2.1 Hex (F 3.5 – F 4.5)<br>Wide: 2.5 Hex (F 5.0) |

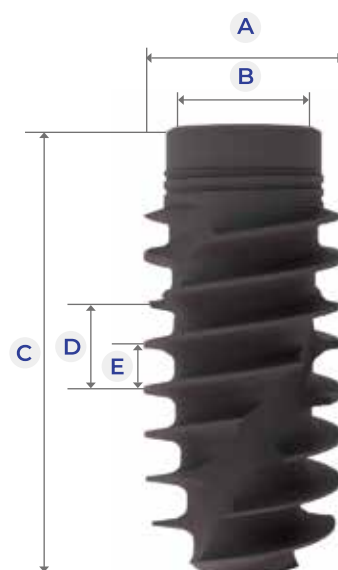

|                             | F 3.5                    | F 4.0                    | F 4.5 | F 5.0                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------|
| <b>A</b> Внешний диаметр    | 3.75                     | 4.25                     | 4.6   | 5.05                           |
| <b>B</b> Диаметр соединения | 2.8                      | 2.8                      | 2.8   | 3.35                           |
| <b>C</b> Длина имплантата   | 8.5 / 10.0 / 11.5 / 13.0 | 8.5 / 10.0 / 11.5 / 13.0 |       | 7.0 / 8.5 / 10.0 / 11.5 / 13.0 |
| <b>D</b> Шаг резьбы         | 2.0                      | 2.0                      | 2.0   | 2.0                            |
| <b>E</b> Интервал резьбы    | 1.0                      | 1.0                      | 1.0   | 1.0                            |
| Применение                  | Фронтальный отдел        | Премоляр / Моляр         | Моляр | Моляр                          |




PREXOLID®  
TYPE X

Винт-заглушка в комплекте


| Платформа<br>(Ø) |                                                                                   | R<br>(2.1 Hex)                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | W<br>(2.5 Hex) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Фикстура         |  |  |  |  |                |
|                  | F 3.5<br>3.75 mm                                                                  | F 4.0<br>4.25 mm                                                                  | F 4.5<br>4.6 mm                                                                     | F 5.0<br>5.05 mm                                                                    |                |
| <hr/>            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                |
| L (мм)           | 7.0                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | FXW 5007       |
| 8.5              | FXR 3508                                                                          | FXR 4008                                                                          | FXR 4508                                                                            |                                                                                     | FXW 5008       |
| 10.0             | FXR 3510                                                                          | FXR 4010                                                                          | FXR 4510                                                                            |                                                                                     | FXW 5010       |
| 11.5             | FXR 3511                                                                          | FXR 4011                                                                          | FXR 4511                                                                            |                                                                                     | FXW 5011       |
| 13.0             | FXR 3513                                                                          | FXR 4013                                                                          | FXR 4513                                                                            |                                                                                     | FXW 5013       |

## СХЕМА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

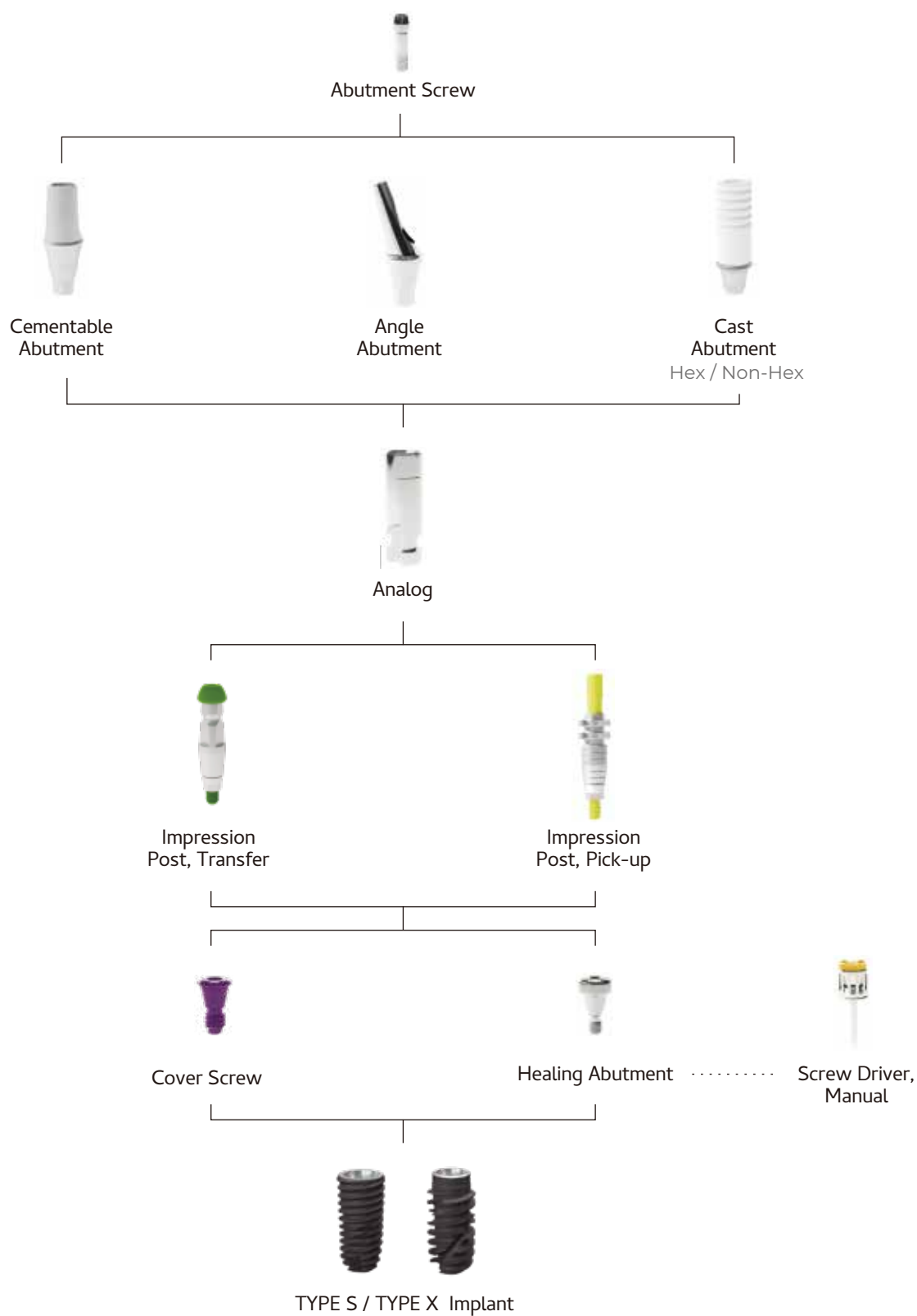

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Cover Screw

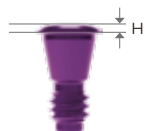

| Соединение  | Номинальный диаметр (фактический) | Длина (мм) | Артикул |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------|
| R (2.1 Hex) | 3.0 (Ø 3.2)                       | 0.4        | CS 32   |
|             | 3.5 (Ø 3.75)                      | 0.4        | CS 37   |
| W (2.5 Hex) | 4.0 (Ø 4.3)                       | 0.4        | CS 43   |

Healing Abutment



| Соединение  | Номинальный диаметр (фактический) | G/H (мм) | Артикул |
|-------------|-----------------------------------|----------|---------|
| R (2.1 Hex) | 4.0 (Ø 4.3)                       | 3.0      | HAR 403 |
|             |                                   | 4.0      | HAR 404 |
|             |                                   | 5.0      | HAR 405 |
|             |                                   | 6.0      | HAR 406 |
|             |                                   | 7.0      | HAR 407 |
|             | 4.5 (Ø 4.8)                       | 3.0      | HAR 453 |
|             |                                   | 4.0      | HAR 454 |
|             |                                   | 5.0      | HAR 455 |
|             |                                   | 6.0      | HAR 456 |
|             |                                   | 7.0      | HAR 457 |
| W (2.5 Hex) | 4.0 (Ø 4.3)                       | 3.0      | HAW 403 |
|             |                                   | 4.0      | HAW 404 |
|             |                                   | 5.0      | HAW 405 |
|             |                                   | 6.0      | HAW 406 |
|             |                                   | 7.0      | HAW 407 |
|             | 4.5 (Ø 4.8)                       | 3.0      | HAW 453 |
|             |                                   | 4.0      | HAW 454 |
|             |                                   | 5.0      | HAW 455 |
|             |                                   | 6.0      | HAW 456 |
|             |                                   | 7.0      | HAW 457 |
|             | 5.0 (Ø 5.3)                       | 3.0      | HAW 503 |
|             |                                   | 4.0      | HAW 504 |
|             |                                   | 5.0      | HAW 505 |
|             |                                   | 6.0      | HAW 506 |
|             |                                   | 7.0      | HAW 507 |

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Healing Abutment



| Соединение     | Номинальный диаметр (фактический) | G/H (мм) | Артикул |
|----------------|-----------------------------------|----------|---------|
| W<br>(2.5 Hex) | 5.5<br>( $\varnothing$ 5.8)       | 3.0      | HAW 553 |
|                |                                   | 4.0      | HAW 554 |
|                |                                   | 5.0      | HAW 555 |
|                |                                   | 6.0      | HAW 556 |
|                |                                   | 7.0      | HAW 557 |
|                | 6.0<br>( $\varnothing$ 6.3)       | 3.0      | HAW 603 |
|                |                                   | 4.0      | HAW 604 |
|                |                                   | 5.0      | HAW 605 |
|                |                                   | 6.0      | HAW 606 |
|                |                                   | 7.0      | HAW 607 |
|                | 6.5<br>( $\varnothing$ 6.8)       | 3.0      | HAW 653 |
|                |                                   | 4.0      | HAW 654 |
|                |                                   | 5.0      | HAW 655 |
|                |                                   | 6.0      | HAW 656 |
|                |                                   | 7.0      | HAW 657 |
|                | 7.0<br>( $\varnothing$ 7.3)       | 3.0      | HAW 703 |
|                |                                   | 4.0      | HAW 704 |
|                |                                   | 5.0      | HAW 705 |
|                |                                   | 6.0      | HAW 706 |
|                |                                   | 7.0      | HAW 707 |

### CAST (CCM) Abutment



Винт абатмента  
в комплекте

| Соединение     | Диаметр ( $\varnothing$ ) | G/H (мм) | Артикул |
|----------------|---------------------------|----------|---------|
| R<br>(2.1 Hex) | 4.0                       | 1.0      | CCR 401 |
|                | 4.0                       | 3.0      | CCR 403 |
| W<br>(2.5 Hex) | 4.5                       | 1.0      | CCW 451 |
|                | 4.5                       | 3.0      | CCW 453 |


## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Impression  
Post, Transfer



| Соединение  | Диаметр ( Ø ) | Длина (мм) | Артикул |
|-------------|---------------|------------|---------|
| R (2.1 Hex) | 4.0           | 11.0       | ITR 40S |
|             |               | 14.0       | ITR 40L |
|             | 4.5           | 11.0       | ITR 45S |
|             |               | 14.0       | ITR 45L |
| W (2.5 Hex) | 4.0           | 11.0       | ITW 40S |
|             |               | 14.0       | ITW 40L |
|             | 4.5           | 11.0       | ITW 45S |
|             |               | 14.0       | ITW 45L |

Impression  
Post, Pick-up

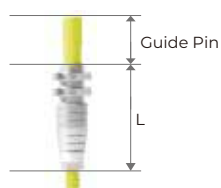

| Соединение  | Диаметр ( Ø ) | Длина (мм) | Артикул |
|-------------|---------------|------------|---------|
| R (2.1 Hex) | 4.0           | 11.0       | IPR 40S |
|             |               | 15.0       | IPR 40L |
|             | 4.5           | 11.0       | IPR 45S |
|             |               | 15.0       | IPR 45L |
| W (2.5 Hex) | 4.0           | 11.0       | IPW 40S |
|             |               | 15.0       | IPW 40L |
|             | 4.5           | 11.0       | IPW 45S |
|             |               | 15.0       | IPW 45L |

Analog



| Соединение  | Диаметр ( Ø ) | Длина (мм) | Артикул |
|-------------|---------------|------------|---------|
| R (2.1 Hex) | 3.0           | 9.0        | LAR 30  |
|             | 3.5           | 9.0        | LAR 35  |
| W (2.5 Hex) | 4.0           | 9.0        | LAW 40  |

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Соединение     | Диаметр ( Ø ) | Высота (мм) | С/Н (мм) | Артикул   |
|----------------|---------------|-------------|----------|-----------|
| R<br>(2.1 Hex) | 4.0           | 4.0         | 1.0      | CAR 40401 |
|                |               |             | 2.0      | CAR 40402 |
|                |               |             | 3.0      | CAR 40403 |
|                |               |             | 4.0      | CAR 40404 |
|                |               |             | 5.0      | CAR 40405 |
|                |               |             | 6.0      | CAR 40406 |
|                |               | 5.5         | 1.0      | CAR 40551 |
|                |               |             | 2.0      | CAR 40552 |
|                |               |             | 3.0      | CAR 40553 |
|                |               |             | 4.0      | CAR 40554 |
|                |               |             | 5.0      | CAR 40555 |
|                |               |             | 6.0      | CAR 40556 |
|                |               | 7.0         | 1.0      | CAR 40701 |
|                |               |             | 2.0      | CAR 40702 |
|                |               |             | 3.0      | CAR 40703 |
|                |               |             | 4.0      | CAR 40704 |
|                |               |             | 5.0      | CAR 40705 |
|                |               |             | 6.0      | CAR 40706 |
|                | 4.5           | 4.0         | 1.0      | CAR 45401 |
|                |               |             | 2.0      | CAR 45402 |
|                |               |             | 3.0      | CAR 45403 |
|                |               |             | 4.0      | CAR 45404 |
|                |               |             | 5.0      | CAR 45405 |
|                |               |             | 6.0      | CAR 45406 |
|                |               | 5.5         | 1.0      | CAR 45551 |
|                |               |             | 2.0      | CAR 45552 |
|                |               |             | 3.0      | CAR 45553 |
|                |               |             | 4.0      | CAR 45554 |
|                |               |             | 5.0      | CAR 45555 |
|                |               |             | 6.0      | CAR 45556 |
|                |               | 7.0         | 1.0      | CAR 45701 |
|                |               |             | 2.0      | CAR 45702 |
|                |               |             | 3.0      | CAR 45703 |
|                |               |             | 4.0      | CAR 45704 |
|                |               |             | 5.0      | CAR 45705 |
|                |               |             | 6.0      | CAR 45706 |

### Transfer Abutment



Винт абатмента  
в комплекте

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



| Соединение     | Диаметр ( Ø ) | Высота (мм) | G/H (мм) | Артикул   |
|----------------|---------------|-------------|----------|-----------|
| W<br>(2.5 Hex) | 4.5           | 4.0         | 1.0      | CAW 45401 |
|                |               |             | 2.0      | CAW 45402 |
|                |               |             | 3.0      | CAW 45403 |
|                |               |             | 4.0      | CAW 45404 |
|                |               |             | 5.0      | CAW 45405 |
|                |               |             | 6.0      | CAW 45406 |
|                |               | 5.5         | 1.0      | CAW 45551 |
|                |               |             | 2.0      | CAW 45552 |
|                |               |             | 3.0      | CAW 45553 |
|                |               |             | 4.0      | CAW 45554 |
|                |               |             | 5.0      | CAW 45555 |
|                |               |             | 6.0      | CAW 45556 |
|                |               | 7.0         | 1.0      | CAW 45701 |
|                |               |             | 2.0      | CAW 45702 |
|                |               |             | 3.0      | CAW 45703 |
|                |               |             | 4.0      | CAW 45704 |
|                |               |             | 5.0      | CAW 45705 |
|                |               |             | 6.0      | CAW 45706 |
|                | 5.0           | 4.0         | 1.0      | CAW 50401 |
|                |               |             | 2.0      | CAW 50402 |
|                |               |             | 3.0      | CAW 50403 |
|                |               |             | 4.0      | CAW 50404 |
|                |               |             | 5.0      | CAW 50405 |
|                |               |             | 6.0      | CAW 50406 |
|                |               | 5.5         | 1.0      | CAW 50551 |
|                |               |             | 2.0      | CAW 50552 |
|                |               |             | 3.0      | CAW 50553 |
|                |               |             | 4.0      | CAW 50554 |
|                |               |             | 5.0      | CAW 50555 |
|                |               |             | 6.0      | CAW 50556 |
|                |               | 7.0         | 1.0      | CAW 50701 |
|                |               |             | 2.0      | CAW 50702 |
|                |               |             | 3.0      | CAW 50703 |
|                |               |             | 4.0      | CAW 50704 |
|                |               |             | 5.0      | CAW 50705 |
|                |               |             | 6.0      | CAW 50706 |

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Angle Abutment 17°



Винт абатмента  
в комплекте

| Соединение     | Диаметр ( Ø ) | G/H (мм) | Артикул    |
|----------------|---------------|----------|------------|
| R<br>(2.1 Hex) | 4.0           | 1.0      | AAR 17401A |
|                |               | 2.0      | AAR 17402A |
|                |               | 3.0      | AAR 17403A |
|                |               | 4.0      | AAR 17404A |
|                | 4.5           | 1.0      | AAR 17451A |
|                |               | 2.0      | AAR 17452A |
|                |               | 3.0      | AAR 17453A |
|                |               | 4.0      | AAR 17454A |
| W<br>(2.5 Hex) | 4.0           | 1.0      | AAW 17401A |
|                |               | 2.0      | AAW 17402A |
|                |               | 3.0      | AAW 17403A |
|                |               | 4.0      | AAW 17404A |
|                | 4.5           | 1.0      | AAW 17451A |
|                |               | 2.0      | AAW 17452A |
|                |               | 3.0      | AAW 17453A |
|                |               | 4.0      | AAW 17454A |
|                | 5.0           | 1.0      | AAW 17501A |
|                |               | 2.0      | AAW 17502A |
|                |               | 3.0      | AAW 17503A |
|                |               | 4.0      | AAW 17504A |
|                | 6.0           | 1.0      | AAW 17601A |
|                |               | 2.0      | AAW 17602A |
|                |               | 3.0      | AAW 17603A |
|                |               | 4.0      | AAW 17604A |

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Angle Abutment 17°




Винт абатмента  
в комплекте

| Соединение     | Диаметр ( Ø ) | G/H (мм) | Артикул    |
|----------------|---------------|----------|------------|
| R<br>(2.1 Hex) | 4.0           | 1.0      | AAR 17401B |
|                |               | 2.0      | AAR 17402B |
|                |               | 3.0      | AAR 17403B |
|                |               | 4.0      | AAR 17404B |
|                | 4.5           | 1.0      | AAR 17451B |
|                |               | 2.0      | AAR 17452B |
|                |               | 3.0      | AAR 17453B |
|                |               | 4.0      | AAR 17454B |
| W<br>(2.5 Hex) | 4.0           | 1.0      | AAW 17401B |
|                |               | 2.0      | AAW 17402B |
|                |               | 3.0      | AAW 17403B |
|                |               | 4.0      | AAW 17404B |
|                | 4.5           | 1.0      | AAW 17451B |
|                |               | 2.0      | AAW 17452B |
|                |               | 3.0      | AAW 17453B |
|                |               | 4.0      | AAW 17454B |
|                | 5.0           | 1.0      | AAW 17501B |
|                |               | 2.0      | AAW 17502B |
|                |               | 3.0      | AAW 17503B |
|                |               | 4.0      | AAW 17504B |
|                | 6.0           | 1.0      | AAW 17601B |
|                |               | 2.0      | AAW 17602B |
|                |               | 3.0      | AAW 17603B |
|                |               | 4.0      | AAW 17604B |

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ


### Angle Abutment 25°

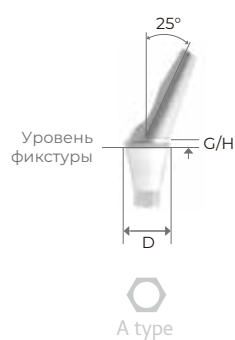

Винт абатмента  
в комплекте

| Соединение     | Диаметр ( Ø ) | Угол ( ° ) | G/H (мм) | Артикул    |
|----------------|---------------|------------|----------|------------|
| R<br>(2.1 Hex) | 4.5           | 25         | 1.0      | AAR 25451A |
|                |               |            | 2.0      | AAR 25452A |
|                |               |            | 3.0      | AAR 25453A |
|                |               |            | 4.0      | AAR 25454A |
|                |               |            | 5.0      | AAR 25455A |
| W<br>(2.5 Hex) | 5.0           | 25         | 1.0      | AAW 25501A |
|                |               |            | 2.0      | AAW 25502A |
|                |               |            | 3.0      | AAW 25503A |
|                |               |            | 4.0      | AAW 25504A |
|                |               |            | 5.0      | AAW 25505A |

## СХЕМА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

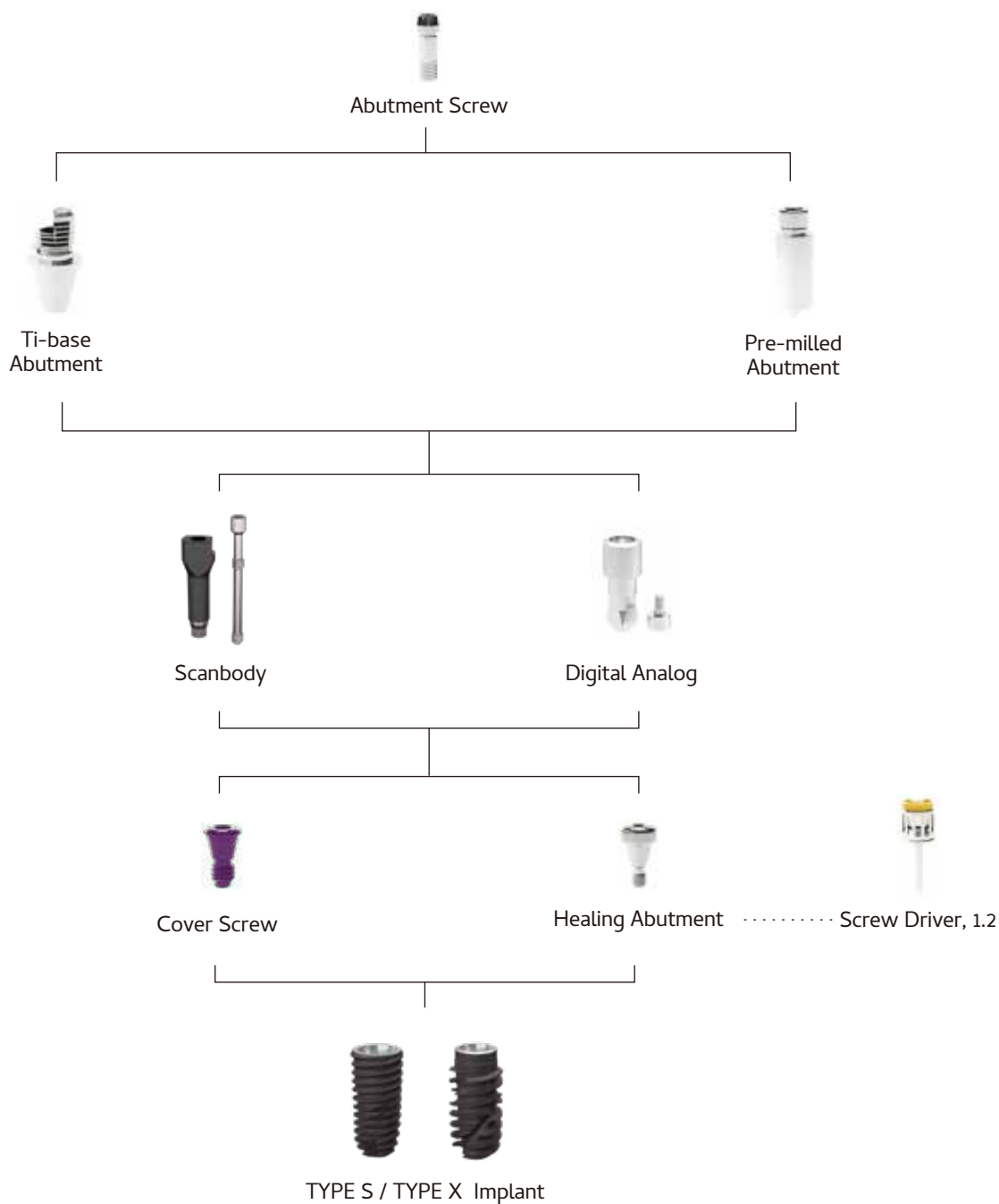

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Pre-milled Abutment



Винт абатмента  
в комплекте

| Соединение  | Диаметр ( Ø ) | Держатель     | Артикул |
|-------------|---------------|---------------|---------|
| R (2.1 Hex) | 10.0          | ARUM (98.0mm) | P1PRA   |
| W (2.5 Hex) | 10.0          | ARUM (98.0mm) | P1PWA   |

### Ti-base Abutment



Винт абатмента  
в комплекте

| Соединение         | Диаметр ( Ø ) | G/H (мм) | H (мм) | Артикул   |
|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| R<br>(2.1 Hex)     | 4.0           | 1.0      | 4.0    | TBR 4041  |
|                    |               | 2.0      |        | TBR 4042  |
|                    |               | 3.0      |        | TBR 4043  |
|                    |               | 4.0      |        | TBR 4044  |
| W<br>(2.5 Hex)     | 4.5           | 1.0      | 4.0    | TBW 4541  |
|                    |               | 2.0      |        | TBW 4542  |
|                    |               | 3.0      |        | TBW 4543  |
|                    |               | 4.0      |        | TBW 4544  |
| R<br>(2.1 Non-hex) | 4.0           | 1.0      | 4.0    | TBR 4041N |
|                    |               | 2.0      |        | TBR 4042N |
|                    |               | 3.0      |        | TBR 4043N |
|                    |               | 4.0      |        | TBR 4044N |
| W<br>(2.5 Non-hex) | 4.5           | 1.0      | 4.0    | TBW 4541N |
|                    |               | 2.0      |        | TBW 4542N |
|                    |               | 3.0      |        | TBW 4543N |
|                    |               | 4.0      |        | TBW 4544N |

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Scanbody



Винт скан-боди  
в комплекте


| Соединение  | Диаметр ( Ø ) | Длина (мм) | Артикул |
|-------------|---------------|------------|---------|
| R (2.1 Hex) | 4.5           | 10.5       | SBR S   |
|             |               | 14.5       | SBR L   |
| W (2.5 Hex) | 5.5           | 10.5       | SBW S   |
|             |               | 14.5       | SBW L   |

### Digital Analog



| Соединение  | Диаметр ( Ø ) | Артикул |
|-------------|---------------|---------|
| R (2.1 Hex) | 4.1           | DAR     |
| W (2.5 Hex) | 4.6           | DAW     |

## СХЕМА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

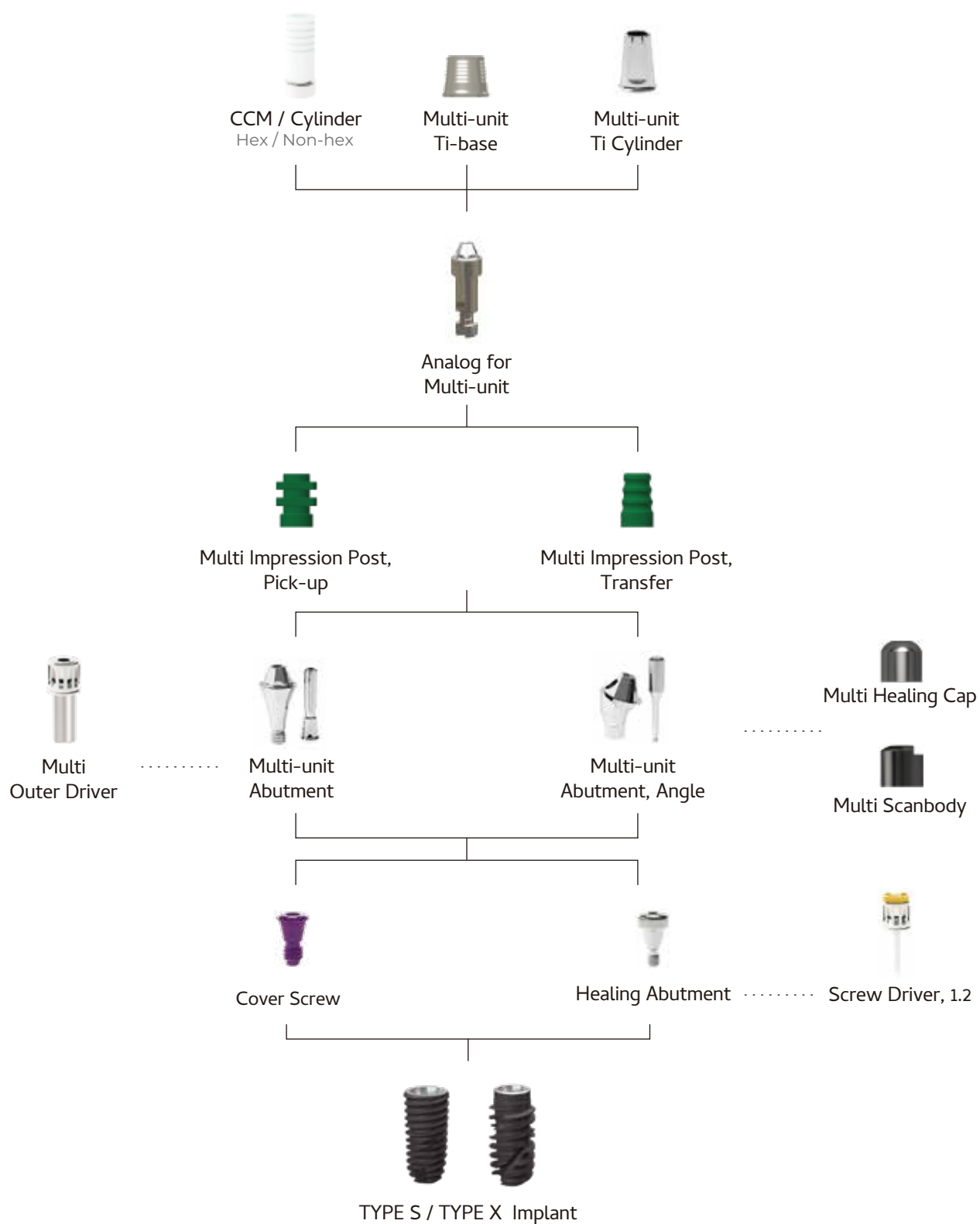


## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Multi-unit Abutment



| Соединение     | Диаметр ( Ø ) | Угол (°) | G/H (мм) | Артикул  |
|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| R<br>(2.1 Hex) | 4.8           | 0        | 1.0      | MAR 4810 |
|                |               |          | 2.0      | MAR 4820 |
|                |               |          | 3.0      | MAR 4830 |
|                |               |          | 4.0      | MAR 4840 |
| W<br>(2.5 Hex) | 4.8           | 0        | 1.0      | MAW 4810 |
|                |               |          | 2.0      | MAW 4820 |
|                |               |          | 3.0      | MAW 4830 |
|                |               |          | 4.0      | MAW 4840 |

### Multi-unit Abutment, Angle

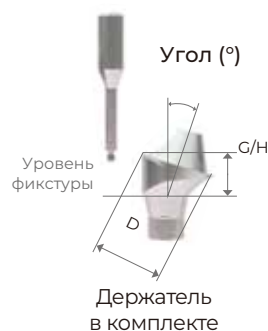

| Соединение     | Диаметр ( Ø ) | Угол (°) | G/H (мм) | Артикул    |
|----------------|---------------|----------|----------|------------|
| R<br>(2.1 Hex) | 4.8           | 17       | 2.5      | MAR 174825 |
|                |               |          | 3.0      | MAR 174830 |
|                |               |          | 4.0      | MAR 174840 |
|                |               | 30       | 3.5      | MAR 304835 |
|                |               |          | 4.0      | MAR 304840 |
|                |               |          | 5.0      | MAR 304850 |
| W<br>(2.5 Hex) | 4.8           | 17       | 2.5      | MAW 174825 |
|                |               |          | 3.0      | MAW 174830 |
|                |               |          | 4.0      | MAW 174840 |
|                |               | 30       | 3.5      | MAW 304835 |
|                |               |          | 4.0      | MAW 304840 |
|                |               |          | 5.0      | MAW 304850 |

### Multi-Unit Abutment Driver



### Multi Scanbody



### Multi Healing Cap



### Multi Prosthetic Screw



Артикул

MUD

Артикул

MSB

Артикул

MHC

Артикул

MPS

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Multi Impression Post,  
Pick-up



| Hex     | Диаметр ( Ø ) | Длина (мм) | Артикул  |
|---------|---------------|------------|----------|
| Hex     | 4.8           | 10.0       | MIP 48S  |
|         |               | 15.0       | MIP 48L  |
| Non-Hex | 4.8           | 10.0       | MIP 48SN |
|         |               | 15.0       | MIP 48LN |

Multi Impression Post,  
Transfer



| Hex     | Диаметр ( Ø ) | Артикул |
|---------|---------------|---------|
| Non-Hex | 4.8           | MIT 48  |

Multi Analog



| Диаметр ( Ø ) | Артикул |
|---------------|---------|
| 4.8           | MUA 48  |
| 5.5           | MUA 55  |

Multi-unit  
Ti Cylinder



| Диаметр ( Ø ) | Hex     | Артикул |
|---------------|---------|---------|
| 5.0           | Hex     | MCP 50H |
| 5.0           | Non-Hex | MCP 50N |

Multi-unit  
CCM Cylinder




| Соединение                   | Диаметр ( Ø ) | Артикул |
|------------------------------|---------------|---------|
| R (2.1 Hex)<br>/ W (2.5 Hex) | 4.0           | CCS 40H |
| Non-Hex                      | 4.0           | CCS 40N |

Multi-unit  
Ti-base




| Угол (°) | Длина (мм) | Артикул  |
|----------|------------|----------|
| 5        | 4          | MTA 0405 |
| 10       |            | MTA 0410 |
| 5        | 6          | MTA 0605 |

# PRO SURGICAL KIT

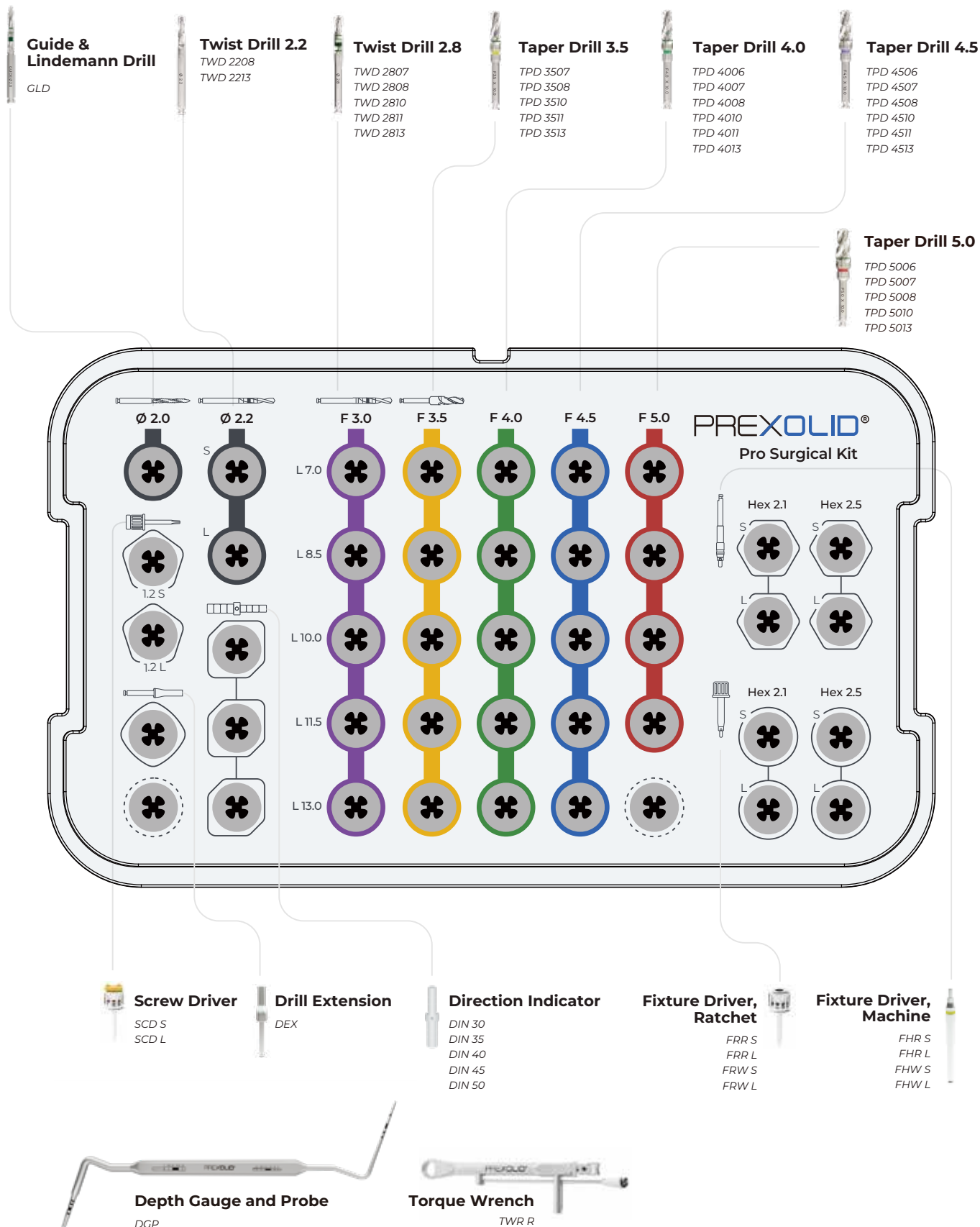

# COMPACT SURGICAL KIT

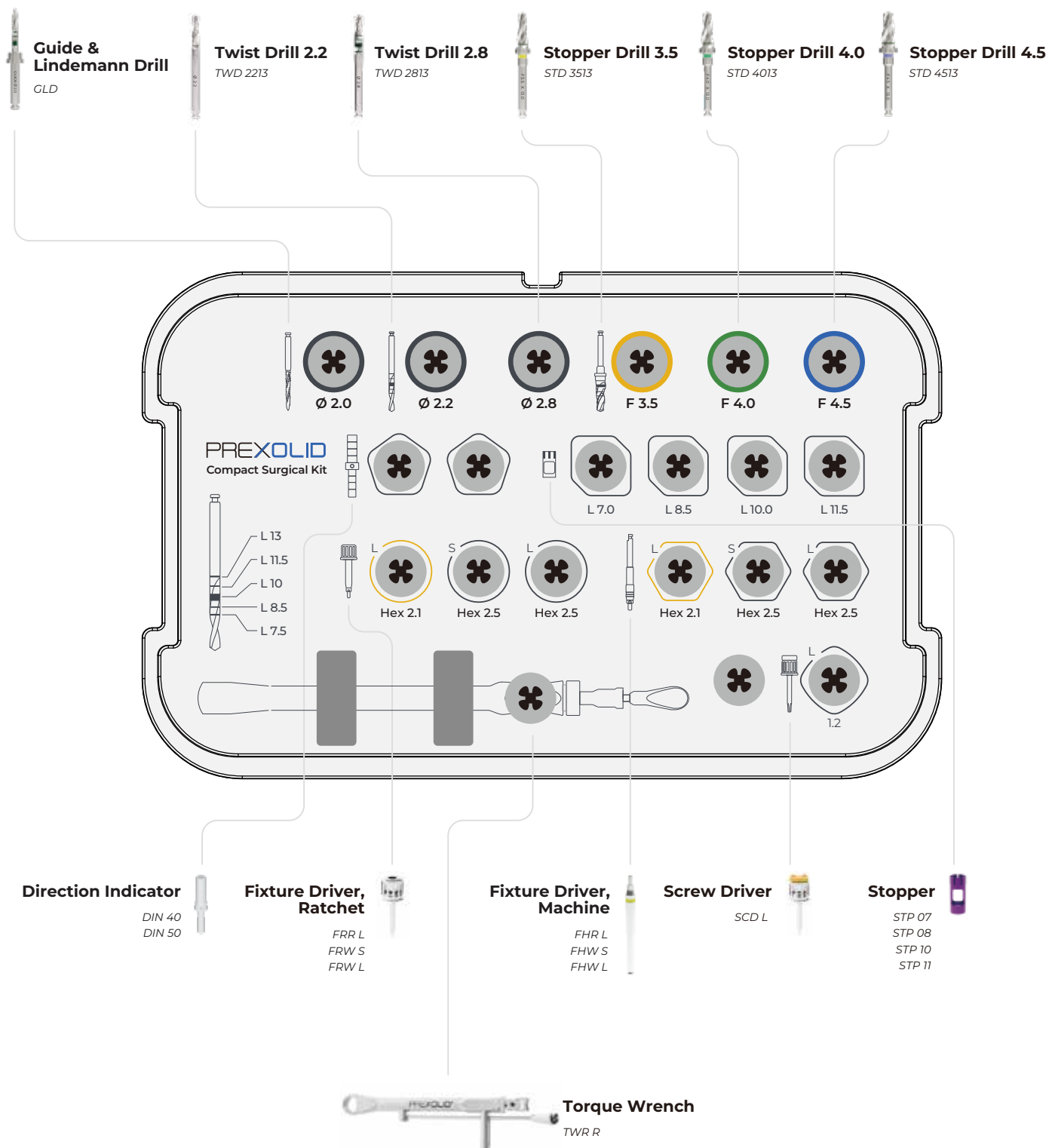



## Drills

| Инструмент        | Диаметр ( Ø ) | Длина (мм)                         | Артикул                                                  | Инструмент      | Диаметр ( Ø ) | Длина (мм)                                | Артикул                                                              |
|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Guide & Lindemann | 2.0           | 13.0                               | GLD                                                      | Taper Drill 3.5 | 3.5           | 7.0<br>8.5<br>10.0<br>11.5<br>13.0        | TPD 3507<br>TPD 3508<br>TPD 3510<br>TPD 3511<br>TPD 3513             |
| Twist Drill 2.2   | 2.2           | 8.5<br>13.0                        | TWD 2208<br>TWD 2213                                     | Taper Drill 4.0 | 4.0           | 6.0<br>7.0<br>8.5<br>10.0<br>11.5<br>13.0 | TPD 4006<br>TPD 4007<br>TPD 4008<br>TPD 4010<br>TPD 4011<br>TPD 4013 |
| Twist Drill 2.8   | 2.8           | 7.0<br>8.5<br>10.0<br>11.5<br>13.0 | TWD 2807<br>TWD 2808<br>TWD 2810<br>TWD 2811<br>TWD 2813 | Taper Drill 4.5 | 4.5           | 6.0<br>7.0<br>8.5<br>10.0<br>11.5<br>13.0 | TPD 4506<br>TPD 4507<br>TPD 4508<br>TPD 4510<br>TPD 4511<br>TPD 4513 |
| Stopper Drill 3.5 | 3.5           | 13.0                               | STD 3513                                                 | Taper Drill 5.0 | 5.0           | 6.0<br>7.0<br>8.5<br>10.0<br>13.0         | TPD 5006<br>TPD 5007<br>TPD 5008<br>TPD 5010<br>TPD 5013             |
| Stopper Drill 4.0 | 4.0           | 13.0                               | STD 4013                                                 |                 |               |                                           |                                                                      |
| Stopper Drill 4.5 | 4.5           | 13.0                               | STD 4513                                                 |                 |               |                                           |                                                                      |

## Drivers



| Инструмент              | Диаметр ( Ø )     | Длина (мм)     | Артикул |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Screw Driver            | 1.2               | Short (S) 13.0 | SCD S   |
|                         |                   | Long (L) 20.0  | SCD L   |
| Fixture Driver, Ratchet | Hex 2.1 (Regular) | Short (S) 28.0 | FRR S   |
|                         |                   | Long (L) 33.0  | FRR L   |
|                         | Hex 2.5 (Wide)    | Short (S) 28.0 | FRW S   |
|                         |                   | Long (L) 33.0  | FRW L   |
| Fixture Driver, Machine | Hex 2.1 (Regular) | Short (S) 19.0 | FHR S   |
|                         |                   | Long (L) 27.0  | FHR L   |
|                         | Hex 2.5 (Wide)    | Short (S) 19.0 | FHW S   |
|                         |                   | Long (L) 27.0  | FHW L   |

## Instruments




| Инструмент    | Спецификация                                   | Артикул                              | Инструмент          | Спецификация                              | Артикул                                        |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Stopper       | L 7.0 mm<br>L 8.5 mm<br>L 10.0 mm<br>L 11.5 mm | STP 07<br>STP 08<br>STP 10<br>STP 11 | Direction Indicator | Ø 3.0<br>Ø 3.5<br>Ø 4.0<br>Ø 4.5<br>Ø 5.0 | DIN 30<br>DIN 35<br>DIN 40<br>DIN 45<br>DIN 50 |
| Torque Wrench | Round                                          | TWR R                                |                     |                                           |                                                |

# TYPE S

## Протокол сверления

(Длина: 10 мм)

### F 3.0

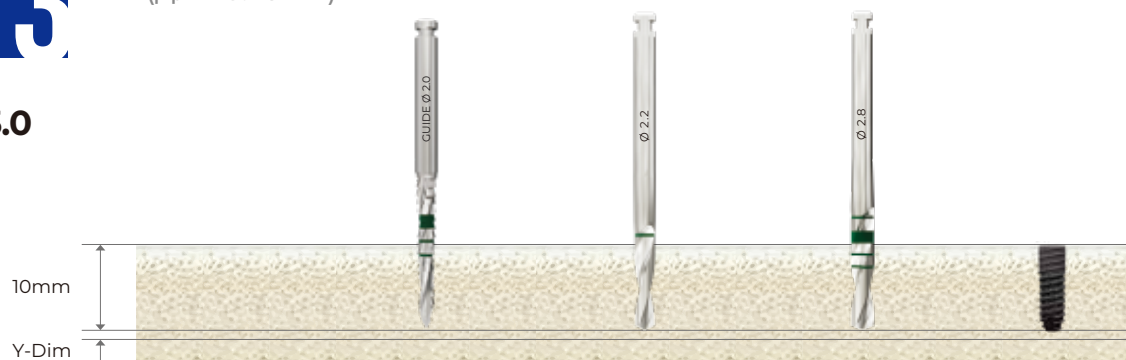

| Тип кости  | Guide Drill | Twist Drill (Ø 2.2) | Twist Drill (Ø 2.8) | F 3.0 Fixture        |
|------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Мягкая     | ○           | ○                   |                     | Установка имплантата |
| Нормальная | ○           | ○                   | ○                   |                      |
| Плотная    | ○           | ○                   |                     |                      |

Без Taper Drill. Узкий гребень во фронтальном отделе — приоритет осевой точности.

### F 3.5



| Тип кости  | Guide Drill | Twist Drill (Ø 2.2) | Twist Drill (Ø 2.8) | Taper Drill (F 3.5) | F 3.5 Fixture        |
|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Мягкая     | ○           | ○                   | ○                   |                     | Установка имплантата |
| Нормальная | ○           | ○                   | ○                   | ○                   |                      |
| Плотная    | ○           | ○                   | ○                   | ○                   |                      |

Универсальный фронтальный размер — контролируйте изменение сопротивления при введении Taper Drill.

### F 4.0




| Тип кости  | Guide Drill | Twist Drill (Ø 2.2) | Twist Drill (Ø 2.8) | Taper Drill (F 3.5) | Taper Drill (F 4.0) | F 4.0 Fixture        |
|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Мягкая     | ○           | ○                   | ○                   | ○                   |                     | Установка имплантата |
| Нормальная | ○           | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   |                      |
| Плотная    | ○           | ○                   | ○                   | ○                   |                     |                      |

Переходная зона премоляров/моляров — перепроверьте верхушки корней и дно синуса на рентгенограмме. Наиболее плотная посадка в линейке — ожидается сравнительно более высокое сопротивление при установке.

## F 4.5

10mm

Y-Dim

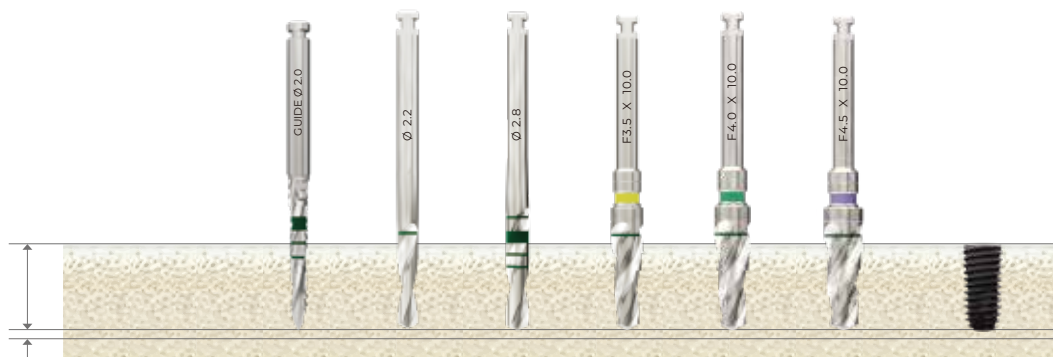


| Тип кости  | Guide Drill | Twist Drill (Ø 2.2) | Twist Drill (Ø 2.8) | Taper Drill (F 3.5) | Taper Drill (F 4.0) | Taper Drill (F 4.5) | F 4.5 Fixture        |
|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Мягкая     | ○           | ○                   | ○                   |                     | ○                   |                     | Установка имплантата |
| Нормальная | ○           | ○                   | ○                   | ○                   |                     | ○                   |                      |
| Плотная    | ○           | ○                   | ○                   | ○                   |                     |                     |                      |

Степень наружного диаметра меньше, чем у 4.0 (4.25+4.6) — ожидается плавное продвижение без скачков.

## F 5.0

10mm

Y-Dim

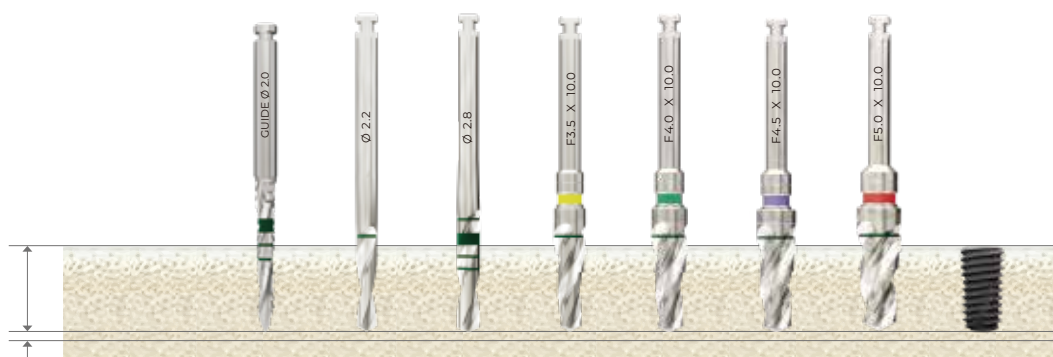

| Тип кости  | Guide Drill | Twist Drill (Ø 2.2) | Twist Drill (Ø 2.8) | Taper Drill (F 3.5) | Taper Drill (F 4.0) | Taper Drill (F 4.5) | Taper Drill (F 5.0) | F 5.0 Fixture        |
|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Мягкая     | ○           | ○                   | ○                   |                     | ○                   |                     |                     | Установка имплантата |
| Нормальная | ○           | ○                   | ○                   | ○                   |                     | ○                   |                     |                      |
| Плотная    | ○           | ○                   | ○                   | ○                   |                     |                     | ○                   |                      |

Широкий имплантат: обязательно специальное финальное сверло, без упрощенного препарирования.

## Скорость (об/мин) по типам кости

| КОСТЬ                     | СВЕРЛО             | ФИКСТУРА |
|---------------------------|--------------------|----------|
| <b>D1</b> Плотная         | 500–800            | 15–20    |
| <b>D2 / D3</b> Нормальная | 800–1200           | 20–30    |
| <b>D4</b> Мягкая          | 800–1200 ↓ н и ж е | 15–20    |

Все значения в об/мин. При кости D4 придерживайтесь нижней границы во избежание чрезмерной компрессии.

## Торк установки

Н·см


|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ≥ 55  | <b>ОПАСНО</b> — риск некроза кости / перелома фикстуры |
| > 40  | <b>ВНИМАНИЕ</b> —перепроверьте ограничитель торка      |
| ≥ 35  | Минимум для <b>немедленной нагрузки</b>                |
| ≥ 30  | Целевая стабильность: <b>мягкая кость D4</b>           |
| 20–40 | Рекомендуемый рабочий диапазон                         |
| < 20  | При торке ниже данного уровня снижается выживаемость   |

# TYPE X

## Протокол сверления


(Длина: 10 мм)

### F 3.5

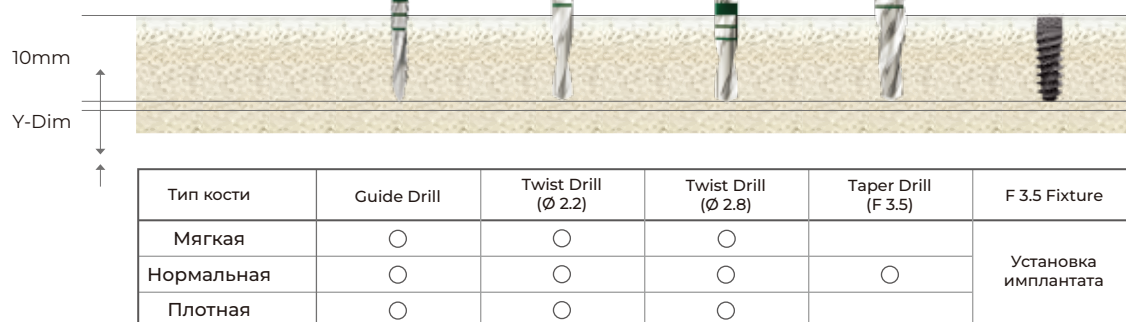


Наименьший размер в линейке Type X (без опции Ø3.0). Размер для фронтального отдела.

### F 4.0

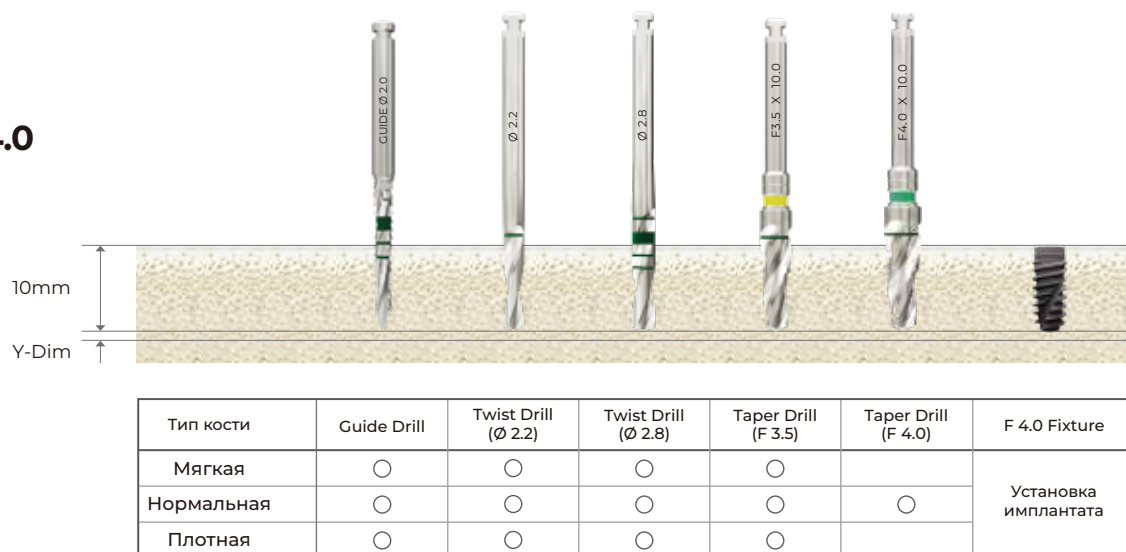

Переход к премолярам/молярам — перепроверьте верхушки корней и дно синуса на рентгенограмме. Наиболее плотная посадка в линейке — ожидается чуть более высокое сопротивление при установке.

### F 4.5

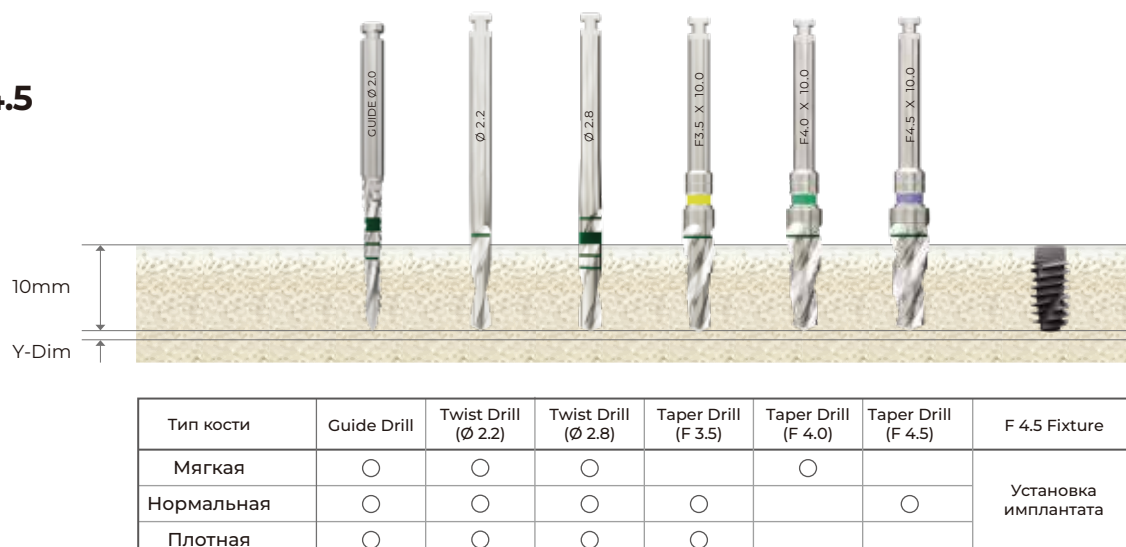


Более широкая ортопедическая платформа и соединение начинаются со следующего размера (Ø5.0) — без изменений на данном этапе сверления.

# TYPE X

## Протокол сверления

(Длина: 10 мм)

F 5.0

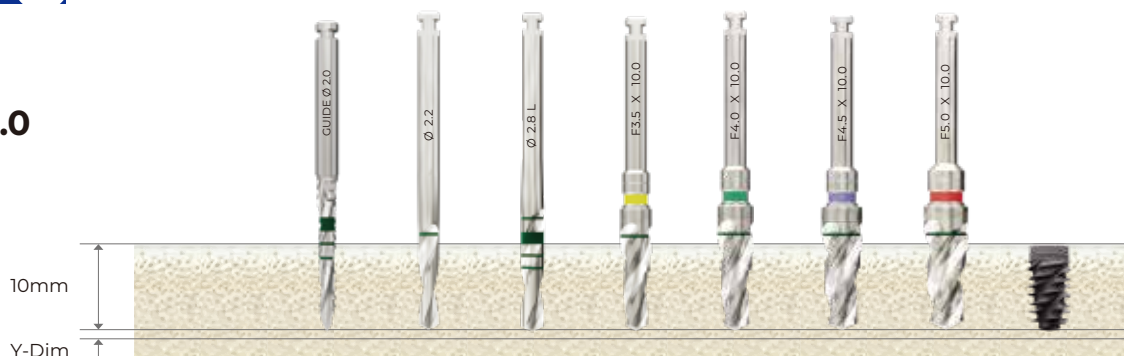

| Тип кости  | Guide Drill | Twist Drill (Ø 2.2) | Twist Drill (Ø 2.8) | Taper Drill (F 3.5) | Taper Drill (F 4.0) | Taper Drill (F 4.5) | Taper Drill (F 5.0) | F 5.0 Fixture        |
|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Мягкая     | ○           | ○                   | ○                   |                     | ○                   | ○                   |                     | Установка имплантата |
| Нормальная | ○           | ○                   | ○                   | ○                   |                     |                     |                     |                      |
| Плотная    | ○           | ○                   | ○                   | ○                   |                     |                     | ○                   |                      |

Широкий имплантат: обязательно специальное финальное сверло.

Более широкая ортопедическая платформа и соединение только у этого размера.

Линейка Type X использует те же сверла серии F, что и Type S — отдельный хирургический набор не требуется.

**Скорость  
(об/мин)  
по типам кости**

| КОСТЬ              | СВЕРЛО          | ФИКСТУРА |
|--------------------|-----------------|----------|
| D1 Плотная         | 500–800         | 15–20    |
| D2 / D3 Нормальная | 800–1200        | 20–30    |
| D4 Мягкая          | 800–1200 + ниже | 15–20    |

Все значения в об/мин. При кости D4 придерживайтесь нижней границы во избежание чрезмерной компрессии.

**Торк  
установки**

Н·см

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ≥ 55  | <b>ОПАСНО</b> — риск некроза кости / перелома фикстуры |
| > 40  | <b>ВНИМАНИЕ</b> — перепроверьте ограничитель торка     |
| ≥ 35  | Минимум для <b>немедленной нагрузки</b>                |
| ≥ 30  | Целевая стабильность: <b>мягкая кость D4</b>           |
| 20–40 | Рекомендуемый рабочий диапазон                         |
| < 20  | При торке ниже данного уровня снижается выживаемость   |

# PREXOLID® СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ

Product Catalog 2026

ECLECTIC Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

ECLECTIC and/or other trademarks and logos from ECLECTIC used herein are the trademarks or registered trademarks of ECLECTIC.



[www.prexolid.com](http://www.prexolid.com)